

1




Open de vernevelaar.

2



Draai de ampul met vernevelmedicijn open, leeg de inhoud in de vernevelaar en controleer of de ampul leeg is.

3

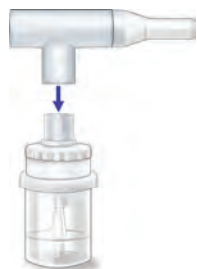

Sluit de vernevelaar en houd deze rechtop. Plaats het mondstuk of masker op de vernevelaar.

4



Ga rechtop zitten. Wanneer dit niet mogelijk is, zorg dan dat de vernevelaar zo rechtop mogelijk wordt gehouden.

5



Plaats het mondstuk tussen de tanden en sluit de lippen eromheen. Zet de compressor aan.

6



Richt de kin iets omhoog. Adem rustig in en uit door de mond (niet door de neus inademen).

7



Stop met vernevelen als deze begint te pruttelen. Zet de compressor uit.

8



Haal de slang van de vernevelaar.

9



Spoel zo nodig de mond/keel en eet of drink iets.

Goed om te weten



- Let op de maximale bewaarduur en de bewaartemperatuur van de vernevelmedicatie.
- Na gebruik de compressor nog even kort aanzetten om eventuele condens uit de slang te blazen.
- Na overleg met de behandelaar de medicatie-oplossing eventueel aanvullen met NaCl 0,9%. Nooit met gekookt of gedestilleerd water aanvullen.



Reinigen (na elk gebruik)



- Demonteer de vernevelaar volledig.
- Reinig de onderdelen in een schoon handwarm sopje en spoel deze af met handwarm stromend water. Alle onderdelen goed drogen met een schone niet-pluizende doek of tissue.
- Bewaar de vernevelaar en het mondstuk of masker in een schone droge doek of washandje.



Reinigen (wekelijks)



- Vernevelaar in zijn geheel en het mondstuk (niet het masker) maximaal 5 minuten uitkoken en op een schone doek aan de lucht laten drogen.



- Maak de compressor schoon en stofvrij met een droge doek.



- Slang alleen aan de buitenkant nat afnemen en drogen.

Vernevelen thuis

Naam: _____

Datum: _____

Voor info contact opnemen met: _____

Telefoon: _____

